



Shamir **SV III AS Worn™**

Le verre unifocal pour une vision
sur-mesure en haute résolution




shamir
Perfect vision
Personal touch

Shamir SV III As Worn™

Grâce aux technologies optiques les plus avancées en matière de verres simple vision, Shamir propose aujourd'hui aux porteurs de corrections unifocales une expérience visuelle sur mesure et la promesse d'une vision la plus nette et la plus confortable possible.

Les verres **Shamir SV III As Worn™** apportent ainsi de réels bénéfices visuels à vos patients: une vraie solution entièrement individualisée à partir de la prescription et du choix de leur monture !

SHAMIR SV III AS WORN™ vs. VERRE UNIFOCAL TRADITIONNEL

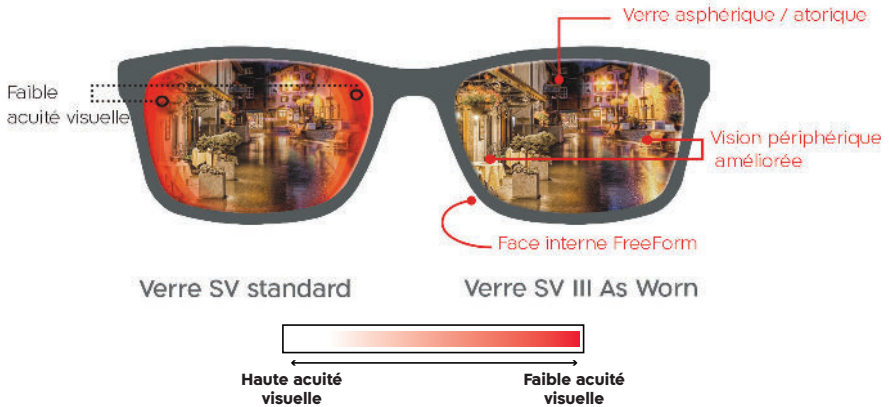

Nouvelles Technologies pour une vision améliorée

Leader innovant dans la conception des verres, Shamir présente Shamir SV III As Worn qui intègre 2 technologies exclusives :




EYE POINT TECHNOLOGY III prend en compte les expériences porteurs et traduit les données essentielles de la prescription. Cela garantit une expérience visuelle améliorée, offrant des champs de vision plus larges et des tailles d'images fidèles à la réalité pour chaque correction.




AS-WORN QUADRO™ est la technologie As-Worn Quadro assure quelle que soit la monture, choisie par le porteur la même précision de vision que lors de l'examen de vue et ses conditions de port spécifiques (lunettes d'essai ou réfractomètre).

Le recalcul des puissances prescrites se base sur 4 fois plus de données sources pour mieux tenir compte des conditions de ports très variées et offre un confort visuel inédit grâce à une meilleure maîtrise des aberrations.

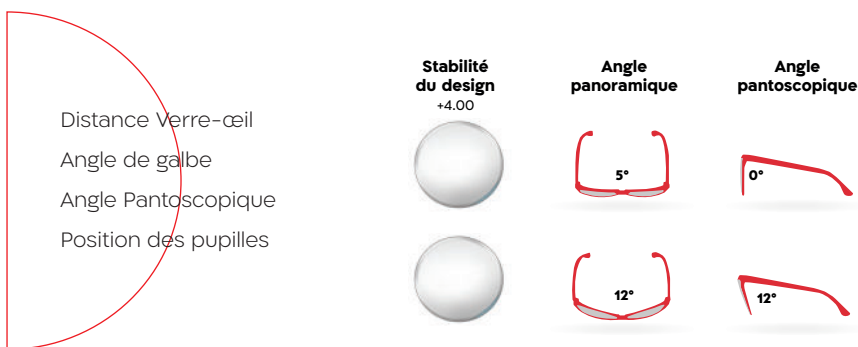

La technologie de fabrication **FREEFORM additionnée aux innovations Shamir** ont permis de créer aujourd'hui le verre simple vision le plus abouti et individualisé. Le surfaçage la face interne offre un résultat personnalisé avec une extrême précision et qualité optique (0.01 Dioptrie).

Pour les fortes amétropies, les verres Smart SV III As Worn™ bénéficient du savoir Shamir As Worn™ Quadro qui assure la livraison d'un équipement final esthétique avec des verres plus fins grâce à la réduction de l'épaisseur latérale et de la prise en compte du delta d'épaisseur entre les différents axes du cylindre.

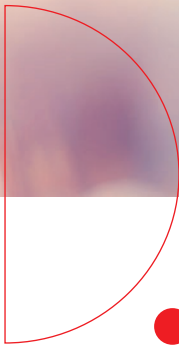


● Shamir SV III As Worn™ et la lumière bleue

Les effets néfastes de la lumière bleue émise par les écrans et la lumière artificielle sont de plus en plus connus. C'est pourquoi nous recommandons d'associer Shamir SV III As Worn™ avec notre solution contre la lumière bleue nocive : Blue Zero™



Shamir SV III As Worn est disponible en Blue Zero™ matériau avec protection anti-lumière bleue intégrée. Basé sur un polymère unique Shamir Blue Zero™ coupe les UV à 420 nm et filtre 48% de la lumière bleue nocive tout en conservant un verre transparent.

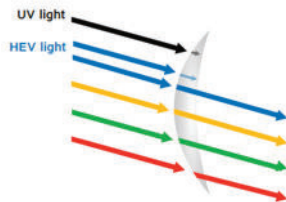

LE MEILLEUR CHOIX POUR LA SANTÉ VISUELLE

Pour bénéficier d'un maximum de protection quelles que soient les conditions visuelles nous préconisons de combiner les verres **Shamir SV III As Worn™ Blue Zero** à notre traitement **Shamir Glacier UV + Infrarouge** pour garantir une protection complète contre la lumière bleue, les rayons infrarouges et les UV.

Un verre tout en un pour une protection optimale



À qui recommander les verres Shamir SV III As Worn™ ?

- Porteurs aux amétropies moyennes à fortes, sphériques ou cylindriques
- Grandes montures, laissant percevoir plus d'aberrations en périphérie
- Clients exigeants à la recherche de la meilleure qualité solution en matière de verres unifocaux actuels
- Choix de montures avec une inclinaison ou angle pantoscopique supérieure à 5°

BÉNÉFICES PORTEURS

Verres Individualisés

Design personnalisé en fonction de la prescription et des mesures porteurs du client

Liberté dans le choix de montures

S'adapte à tous types et formes de montures

Champ de vision élargi grâce à un design évolué utilisant les dernières technologies de conception numériques

Vision ultra précise possible par l'adéquation du désign unique et des paramètres porteurs

Résultat esthétique avec des verres plus fins et plats



BÉNÉFICES OPTICIENS

Apporte aujourd'hui la réponse visuelle la plus avancée

Mise en avant de son expertise et connaissance des dernières innovations des verres correcteurs

Mise en avant de son professionnalisme et fidélisation client

Satisfaction porteurs

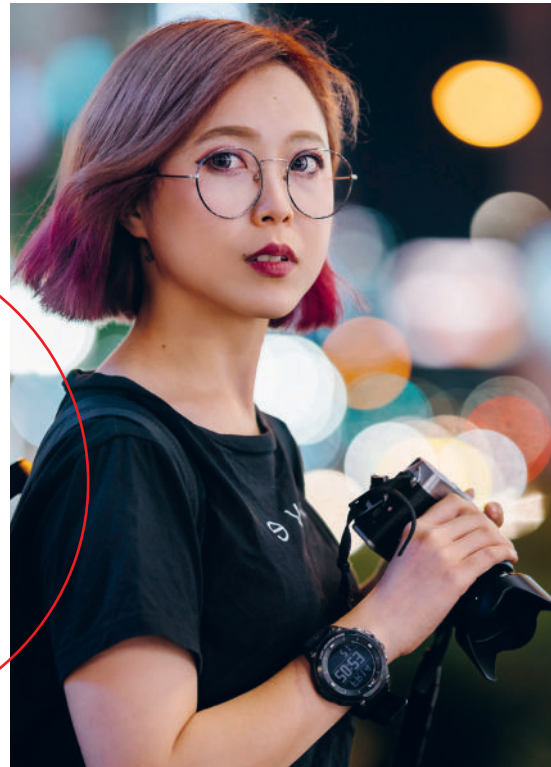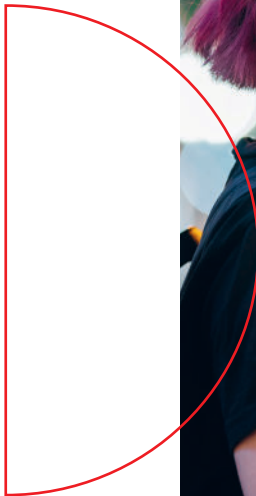

Informations nécessaires et indispensables lors de la commande des verres **Smart SV III As Worn™**

- Correction du porteur
- Écart pupillaire VL (Monoculaire)
 - Hauteur (pleine pupille)
- Paramètres de la monture : taille, hauteur calibre, nez
 - Angle de galbe
- Angle pantoscopique
- Distance Verre-cœil



Individualisé selon la prescription



Personnalisé avec les paramètres monture et anatomiques du porteurs



Vision claire et précise

Optimisez vos prises de mesures avec spark Mi Up notre miroir connecté de PDM d'une précision extrême et simple d'utilisation



INDICES & MATÉRIAUX

1.5 Blanc, Blue Zero, Transitions Gen8, Polarisants

1.59 POLYCARBONATE Blanc, Blue Zero, Transitions Gen8, Polarisants

1.6 Blanc, Blue Zero, Transitions Gen8, Polarisants

1.67 Blanc, Blue Zero, Transitions Gen8, Polarisants

1.74 Blanc, Blue Zero, Transitions Gen8, Polarisants

CORRECTIONS

-14.00 à +6.00

-14.00 à +8.00

-14.00 à +8.00

-16.00 à +16.00

-20.00 à +15.00



Perfect vision. Personal touch

www.shamir.fr